

# Работайте с удовольствием



## KaVo expert series

Настоящие профессионалы знают свои сильные стороны

### NEW! KaVo EXPERTsurg LUX

- Один из самых легких и компактных моторов в мире.
- Автоматическая калибровка одним касанием гарантирует точность скорости и значения крутящего момента для обеспечения максимальной безопасности работы.
- Высокая производительность при крутящем моменте 80 Н·см на инструменте.
- Интуитивный интерфейс, экономящий время.
- Цветной дисплей, упрощающий работу.

**АВТОКАЛИБРОВКА  
В ОДНО КАСАНИЕ!**



# KaVo EXPERTsurg LUX

## Гарантия качества и максимум безопасности

- Автокалибровка одним касанием гарантирует точные скорость и значение крутящего момента для максимальной безопасности.
- Один из самых легких и компактных хирургических моторов в мире.
- Плавный ход, минимум вибрации.

## Высокая надежность и максимальная производительность

- Крутящий момент 80 Н·см на инструменте.
- Технология SMARTdrive обеспечивает высокое значение крутящего момента и минимум вибрации при включении.

## Простота в работе и экономия времени

- Интуитивное простое программирование.
- Пиктограммы и цветной дисплей упрощают работу.
- Легкая очистка.

## 6 настраиваемых параметров

- 10 программ, в каждой из которых индивидуально настраивается до 10 этапов лечения.
- Смена редукции.
- Максимальная скорость.
- Максимальный крутящий момент.
- Производительность помпы (0–4).
- Реверс мотора.




## Технические характеристики

- Напряжение 100–240 В.
- Частота 50/60 Гц.
- Производительность помпы 0–110 мл/мин.

# Инструменты KaVo SURGmatic

## Угловые наконечники KaVo SURGmatic

- с подсветкой – S201 XL и S201 L без подсветки – S201 XC и S201 C
- Редукция 20:1.
- Съемная головка, простая очистка.
- Покрытие EXPERTgrip для лучшего захвата и гигиены.
- Уменьшенная головка с внутренним охлаждением.
- Система внешнего охлаждения.

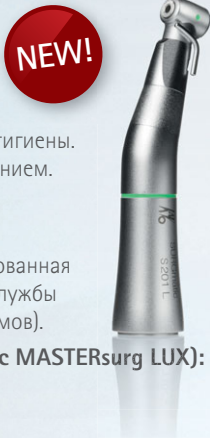

## S201 XL/XC с шестигранными зажимами

- Система шестигранных зажимов, оптимизированная передача и подшипники увеличивают срок службы (подходит для боров без шестигранных зажимов).

## Технические характеристики (в сочетании с MASTERSurg LUX):

- Скорость: 15–2000 об/мин.
- Максимальный крутящий момент: 55 Н·см.

## Прямые наконечники KaVo SURGmatic

- S11 L 1:1 (с подсветкой) S11 C 1:1 (без подсветки)
- Редукция 1:1.
- Покрытие EXPERTgrip для лучшего захвата и гигиены.
- Подходят для стандартных боров 44,5 мм.
- Внешний спрей.



## Технические характеристики (в сочетании с MASTERSurg LUX)

- Максимальная скорость: 40000 об/мин.
- Максимальный крутящий момент: 5,5 Н·см.

Артикул	Название	Описание
1.008.3500	EXPERTsurg LUX	Хирургический набор в комплекте: хирургический мотор INTRA LUX S600 LED, multifunctionальная ножная педаль (длина кабеля 2,5 м), кабель мотора S600 LED, стартовый набор шлангов (5 шт.), держатель для мотора и инструментов, держатель бутылки, встроенный шланговый насос, блок питания
1.008.8000	INTRA LUX S600 LED	Один из самых легких и компактных моторов (на 28% легче и на 20% короче предыдущей модели), скорость 0–40000 об/мин, максимальный крутящий момент 5,5 Н·см (0–12000 об/мин) / от 5,5 до 2,5 Н·см (12000–40000 об/мин), бесщеточный мотор со светодиодной подсветкой KaVo Mini LED
1.009.8757	Набор шлангов S600	Одноразовые стерильные шланги для охлаждения (10 шт.)
1.009.1700	Кабель мотора S600	Гибкий кабель, пригодный для термодезинфекции и автоклавирования, длина 2 м
1.009.3411	Держатель мотора	Подставка для мотора с наконечником, пригодная для термодезинфекции и автоклавирования
1.010.2332	SURGmatic S201 XL	Угловой наконечник с системой шестигранных зажимов, 20:1, с подсветкой
1.010.2333	SURGmatic S201 XC	Угловой наконечник с системой шестигранных зажимов, 20:1, без подсветки
1.009.0470	SURGmatic S201 L	Угловой наконечник, 20:1, с подсветкой
1.009.1100	SURGmatic S201 C	Угловой наконечник, 20:1, без подсветки
1.009.1010	SURGmatic S11 L	Прямой наконечник, 1:1 с подсветкой
1.009.1005	SURGmatic S11 C	Прямой наконечник, 1:1 без подсветки

## Офис в Санкт-Петербурге

195112, Санкт-Петербург,  
Малоохтинский пр-т, д. 64, лит. В  
«Санкт-Петербург Плаза», корп. 3, эт. 5  
Телефон +7 (812) 331-86-96  
Факс +7 (812) 251-06-55  
kavo@kavodental.ru

## Офис в Москве

125167, Москва,  
Ленинградский пр-т, д. 37, стр. 9  
Бизнес-центр «Аэростар», под. № 2  
Телефон/факс +7 (495) 664-75-35  
kavo.msk@kavodental.ru



KaVo. Dental Excellence.

www.kavodental.ru